

# DENGUE AG COMBO ECO TESTE



 **APENAS 1 GOTA DE SANGUE (35 µL)**

 **ÚNICO TESTE COM PEQUENO VOLUME DE AMOSTRA**



— **Teste rápido por imunocromatografia para detecção qualitativa de antígenos NS1 da dengue presente em sangue, soro ou plasma.**

- ▶ **Resultado em apenas 15 minutos**
- ▶ **Excelente custo-benefício**
- ▶ **Procedimento rápido e fácil**



Registro Anvisa: 80954880219



## ► Informações do produto:

<b>Tipo de Teste</b>	Somente para uso profissional
<b>Uso pretendido</b>	Detecção do antígeno NS1 do vírus da Dengue
<b>Tipo de Amostra</b>	Sangue total, Soro e Plasma
<b>Volume de Amostra</b>	35 µL
<b>Tempo de Teste</b>	15 - 30 mins
<b>Armazenamento</b>	2 a 30°C




## Desempenho clínico


<b>Sensibilidade</b>	<b>Especificidade</b>
96%	98%

## ► Procedimento fácil:


### 1. Colete a amostra

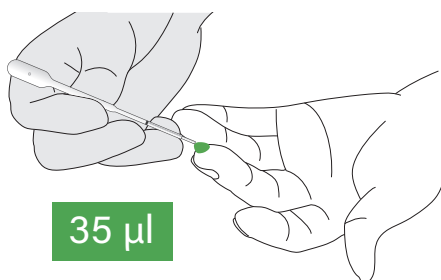

### 2. Adicione a amostra

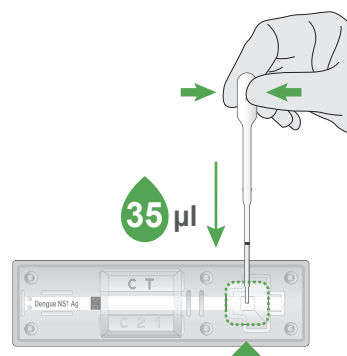

### 3. Adicione 1 gota do tampão diluente

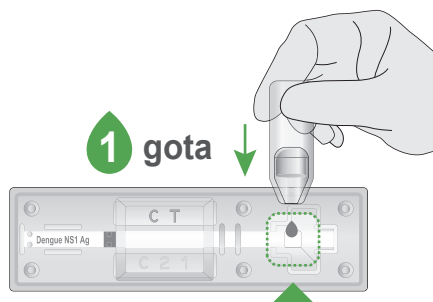

### 4. Aguarde 15 min e leia o resultado.



15 minutos



Não leia após 30 min.